

holtmedical.com.mx

HOLT
MEDICAL



HOLT MEDICAL

**CATÁLOGO
DE PRODUCTO**

HOLT
MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

 **Auzriel**

Línea de Reprocesadoras
y Gabinetes



holtmedical.com.mx


CYW- LÍNEA DE REPROCESADORAS

CYW - 100

Auzrial

CYW-100

REPROCESADORA AUTOMÁTICA
DE ENDOSCOPIOS

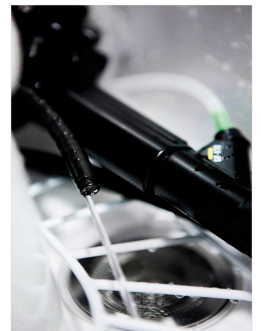

El modelo CYW-100N cumple con el estándar más alto en lo que a protocolos de desinfección de alto nivel y sencillo manejo se refiere. Controla la presión del aire y la resistencia del agua.

Es eficaz y precisa, gracias a su sistema de autodiagnóstico que detecta cualquier falla y requiere poco mantenimiento.

HOLT
MEDICAL

CYW- LÍNEA DE REPROCESADORAS

CYW - 100



Auzrial

CYW-100



Sistema de desinfección del agua con lámpara UV



PROTECCIÓN TRIPLE

Protege pacientes, operadores, y sus endoscopios flexibles



SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO

Efficiente, preciso y con mantenimiento rentable



OPERACIÓN FÁCIL

Función completamente automática

CARACTERÍSTICAS

- Probador de fugas.
- Lavado y desinfección mediante 3 potentes motores.
- Sistema de chorro multicanal con giro de 360°.
- Sistema avanzado de filtrado de agua.
- Sistema de desinfección del agua con lámpara UV.
- Sistema de control térmico para la desinfección.
- Sistema de autodesinfección.
- Sistema de purga de alcohol.
- Conexión de impresora adicional. (Opcional)

CAPACIDAD DEL TANQUE:

Agua 15 lt
Detergente 1.5 lt
Desinfectante 15 lt
Alcohol 1.5 lt

ACOPLADORES:

4 Salidas en base de limpieza

DIMENSIONES:

550 x 560 x 940 mm
(An x Pr x Al)

PESO: 80 kg

CYW- LÍNEA DE REPROCESADORAS

CYW - DUO

CYW-DUO

REPROCESADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS



La Reprocesadora de endoscopios CYW-DUO ofrece todas las características necesarias para proporcionar una triple protección: proteger a los pacientes, proteger a los operadores y proteger los endoscopios flexibles de alto precio.

CYW-DUO establece el estándar más alto en el protocolo de desinfección automatizada de alto nivel con doble cámara y doble endoscopio. Al controlar la presión del aire y la resistencia al agua, CYW-DUO garantiza un lavado y una desinfección perfectos tanto del exterior como del interior de los endoscopios.



El funcionamiento puede ser manual o automático según la selección del operador.

CYW-DUO está equipado con el sistema de autodiagnóstico más eficaz y preciso, que detecta cualquier fallo y requiere poco mantenimiento.

CYW- LÍNEA DE REPROCESADORAS

CYW - DUO



CYW-DUO



PROTECCIÓN TRIPLE

Protege pacientes, operadores, y sus endoscopios flexibles



SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO


eficiente, preciso y con mantenimiento rentable



OPERACIÓN FÁCIL

Función completamente automática

¡AHORRA TIEMPO!

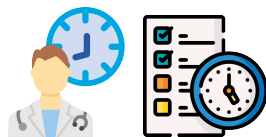

No tienes que esperar que finalice un ciclo de lavado para iniciar otro

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora de carga superior.
- Pantalla táctil.
- Control de calidad del agua.
- Sistema de control térmico.
- Seguridad del operador.
- Potente proceso de lavado.
- Seguridad y validación de ciclo.
- Doble tina de lavado independiente.
- Impresora dinámica.
- Aplica un método completo de limpieza y desinfección interna mediante la aplicación del tipo de sensor de flujo.

SISTEMA DE LAVADO INDEPENDIENTE

El modelo CYW-DUO te permite lavar de manera independiente dos equipos.



ACCESORIOS



SISTEMA DE FILTROS



PAPEL PARA IMPRESORA



CANASTILLA PORTA ACCESORIOS



REJILLA PARA DESAGÜE

ADAPTADORES PARA ENDOSCOPIO



FUJINON



PENTAX



OLYMPUS



Contamos con una amplia variedad de accesorios y adaptadores endoscópicos. ¡Pregúntanos por ellos!

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS

ENDOCAB PLUS

ENDOCAB

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS



ENDOCAB PLUS garantiza el almacenamiento seguro de los endoscopios en la disposición correcta.

No es necesario volver a desinfectar, reduce la frecuencia de uso de desinfectantes fuertes, lo que prolonga automáticamente la vida útil de los endoscopios y ayudando a reducir los costos.



- Función de datos
- Aplicaciones para endoscopio

Adicional:

- Lector de códigos de barras

DESCRIPCIÓN

- Almacenamiento seguro y adecuado del endoscopio.
- Cortina de aire con filtro HEPA para proteger la calidad del aire.
- Distribución de aire individual a conductos con filtros HEPA y UV-C.
- Sistema de circulación de aire con controlador de temperatura.
- Opcional: Identificación del endoscopio por escáner de código de barras.
- Bloqueo de teclas - seguridad para control de panel táctil.
- Activación automática de la iluminación del armario cuando se abre la puerta.
- Documentación del tiempo de almacenamiento de la cámara en el gabinete confirmado por una copia impresa.



GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ENDOSCOPIOS

ENDOCAB PLUS

CARACTERÍSTICAS

- Seguridad, monitoreo y trazabilidad.
- Distribuidor de aire de canal con aire filtrado HEPA.
- Circulación de aire interna con controlador de temperatura en el gabinete.
- Cortina de aire protege el aire limpio en el interior.
- Ventana de vidrio templado HST.
- LCD TFT a color de 4.3" con pantalla táctil.
- Varias configuraciones por software fáciles de usar.
- Bloqueo de seguridad con llave para el panel táctil de control.
- Dimensiones: Largo 137cm X Ancho 55cm X Alto 210cm



CARRO PARA ENDOSCOPIA


ABIERTO Y CERRADO

ABIERTO

- Estructura fabricada con tubo de acero, acabado en pintura electrostática y cuenta con cubierta.
- Compartimientos desmontables y sistema de fijación anti movimiento para portabilidad por equipo.
- 2 entrepaños de altura variable (48 x 48 cm) 1 cajón (52 x 48 cm).
- Rodaja de hule termoplástico de 5" de diametro.
- Cuatro columnas, para mayor estabilidad.
- Cajón inferior deslizante, correderas de extensión y porta teclado.

Especificaciones técnicas

Alto: 135 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 60 cm.

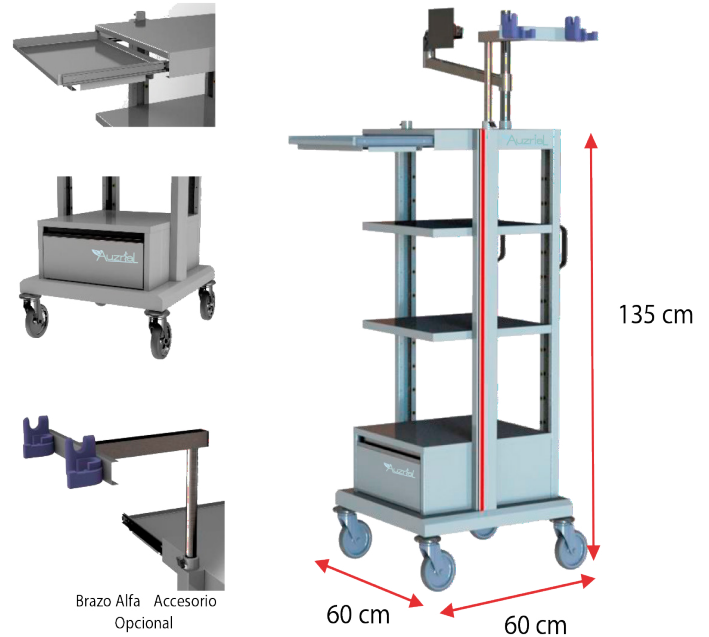

Especificaciones técnicas

Alto: 135 cm.
Ancho: 60 cm.
Largo: 60 cm.



CERRADO

- Estructura fabricada con tubo de acero calibre 22.
- Acabado en pintura electrostática.
- Cuenta con cubierta.
- Compartimientos desmontables y sistema de fijación anti movimiento para portabilidad por equipo.
- 2 entrepaños de altura variable (48 x 48 cm).
- 1 cajón (52 x 48 cm).
- Rodaja 12.5" de diametro. (2 con freno).
- Cuenta con: Pasa cable, porta teclado y porta tanque (2 aros).
- Brazo porta endoscopios.

PORTABLE Y DE FÁCIL MANEJO

Ideal para traslados de urgencia o almacenamiento compacto y seguro

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Cápsula Endoscópica HD y Bomba de Irrigación

 JINSHAN | Life Insights



CÁPSULA ENDOSCÓPICA HD

Vista Inteligente



OMOM HD

SU ELECCIÓN DEFINITIVA PARA EL
ESTUDIO DEL INTESTINO DELGADO

El sistema OMOM HD integra la Inteligencia Artificial y la tecnología óptica más avanzada. El último modelo de la cápsula OMOM HD tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la salud con una facilidad sin precedentes en la interpretación de los estudios de endoscopia con cápsula. Interpretar los resultados, no puede ser más sencillo:

Menos tiempo de lectura, más evidencias clínicas.



LECTURA INTELIGENTE

La nueva cara: Vista inteligente

Con una actualización importante en el centro de gestión de pacientes y la pantalla de lectura, el nuevo software Vue Smart-Ware ofrece una atención médica a través de una interfaz aún más fácil de usar y una experiencia de lectura sin estrés.



CÁPSULA ENDOSCÓPICA HD

Vista Inteligente




Impulsado por IA, más inteligente que nunca.


Con nuestros avanzados algoritmos de IA, Vue Smart se sitúa a la vanguardia tecnológica en la eliminación de citocromos redundantes, la detección y clasificación de lesiones, lo que garantiza una interpretación más sencilla que nunca, así como mejores resultados clínicos.




Utilizando nuestros algoritmos patentados, SmartScan procesa los archivos sin procesar eliminando hasta el 90 % de redundancia, identificando y etiquetando hasta 16 tipos de anomalías. Una vez realizado el SmartScanning, SmartView y SmartFinding están listos para su uso.

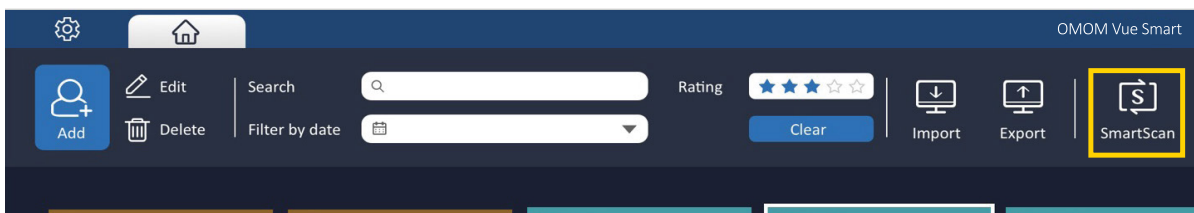

El modo de lectura SmartView solo reproduce las imágenes captadas por Smartscan, lo que facilita la navegación rápida por el vídeo completo. Las marcas resaltadas sobre la barra de tiempo muestran las imágenes que pueden reproducirse como un vídeo corto.

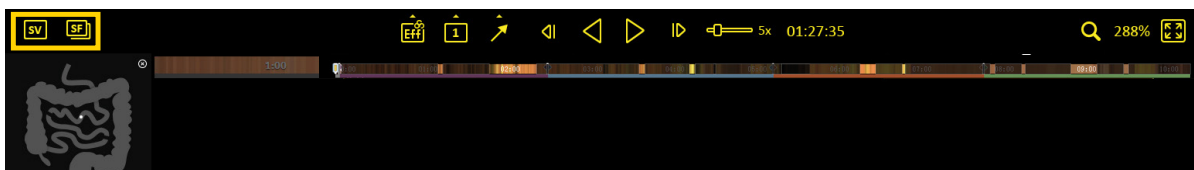

Al capturar las características más destacadas de imágenes seleccionadas con resultados predictivos, SmartFinding ayuda a los médicos a mostrar las anomalías y sugerir descripciones.

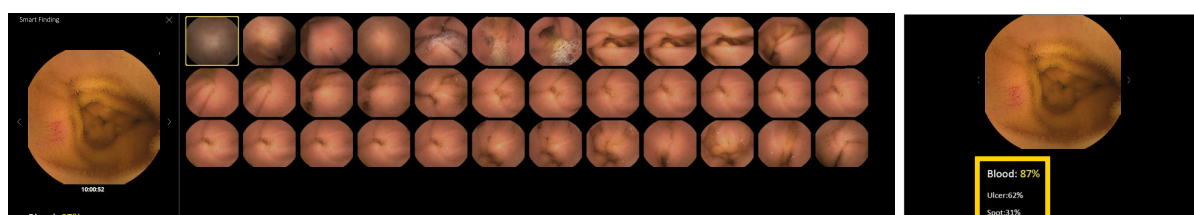

HORIZONTE SIN LÍMITES

Superando los límites del hardware de cápsulas, nuestra nuevo OMOM HD ofrece una calidad de imagen superior, gracias a la tecnología óptica que hemos desarrollado. Con detalles más evidentes en imágenes de mayor resolución, visión ultra gran angular, tecnología SpeedSense y mayor duración de la batería, los usuarios de OMOM HD se encuentran en la era del diagnóstico simple pero confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



512*512 Pixel

Resolución mejorada en más del 300 %
Claridad inigualable



12 Horas

Aumento del horario de trabajo en cápsulas
Mayor alcance y duración



2-10 FPS

Frecuencia de muestreo mejorada.
Actualización de SpeedSense.



Cápsula compacta

Diseño ergonómico.
Dimensiones: 25.4 x 11 mm
Peso: 3 g



172 Grados

Ángulo de visión ultra amplio
Cobertura tisular mejorada



Funda de cinturón desechable

Funda de cinturón desechable ahora está disponible como una opción sin contacto.

BOMBA DE IRRIGACIÓN



JINSHAN | Life Insights

Diseñado para proporcionar un flujo potente, ajustable y constante, Endolinq es su elección ideal de bomba de irrigación endoscópica.

ENDOLINQ™



HOLT
MEDICAL

BOMBA DE IRRIGACIÓN

Descripción general



JINSHAN | Life Insights

Ajustes de flujo

Indicador LED brillante con control de flujo de 10 niveles.

Apagado automático


El riego se detiene automáticamente después de un período de 20 segundos.

Seguridad


El sistema se corta automáticamente si se interrumpe la conexión.

Compatibilidad

Endoling funciona con todas las principales marcas de endoscopia y colonoscopia.

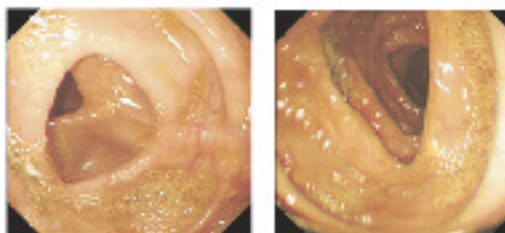

Prelavado

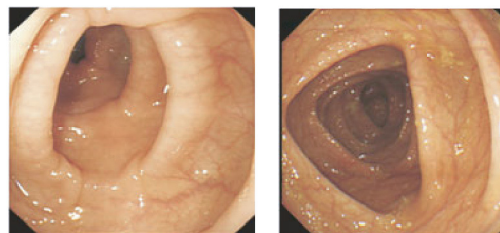

Después del lavado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tasa de flujo:
0-1000 ml / minuto

Presión máxima de alimentación:
<400 KPa

Duración de salida única:
<20 segundos

Marcas de endoscopia compatibles:
Olympus, Fujifilm, Pentax,
Sonoscape, etc.

Tamaño y peso del producto:
Dimensiones: 324 x 160 x 155mm
(An X Pr X Al) Peso: 6 Kg

CATÁLOGO DE PRODUCTO

AMA RUT EXPERT

Prueba Rápida de
Helicobacter Pylori de Ureasa



PRUEBA RÁPIDA DE UREASA

Helicobacter pylori

AMA RUT EXPERT

Prueba rápida con evaluación visual para detectar la actividad de ureasa de *Helicobacter pylori* en biopsia.



El propósito del producto es la determinación precisa y rápida de *Helicobacter pylori* por método de determinación de presencia de actividad de ureasa en una biopsia de pacientes adultos o niños obtenidos por gastroscopia. *Helicobacter pylori* produce la enzima ureasa, que descompone la urea en amoníaco.


El principio de funcionamiento de AMA RUT Expert se basa en cambio de color del indicador después de colocar la muestra de biopsia en el elemento reactivo de prueba. Si hay actividad de ureasa en la muestra de biopsia, aparecerá una sección roja o púrpura en la parte posterior de la prueba. El umbral de sensibilidad es de 2.6×10^4 UFC *Helicobacter pylori*. Las muestras de prueba de biomaterial pueden ser:

- Biopsia de cualquier parte del estómago.
- Biopsia del bulbo duodenal [2, 3, 4].

La muestra de biopsia no debe ser menor de 2 mm en ninguna dimensión.

Preciso, selectivo, multicapa

Estructura avanzada con una capa sensible, formada por una membrana especial.

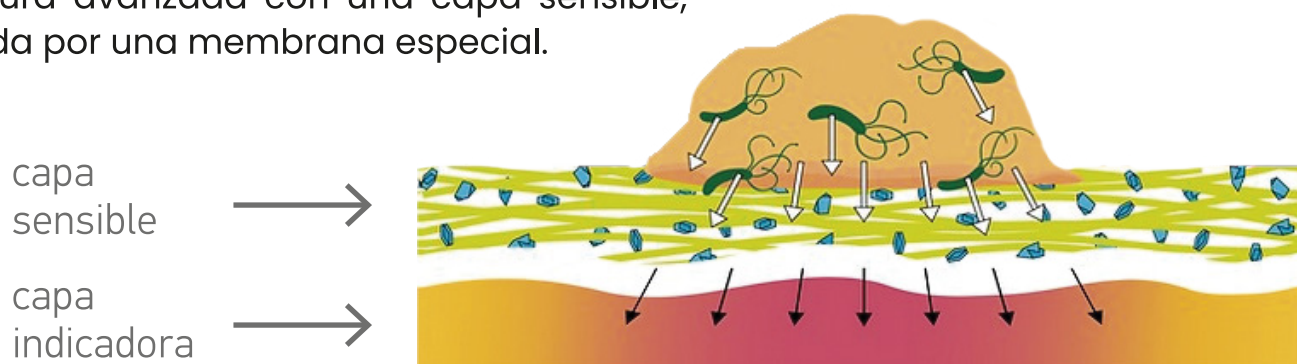

La capa indicadora se separa de las sustancias que provocan reacciones no deseadas. La prueba es selectiva, mostrando sólo resultados positivos en presencia de la ureasa de *H. pylori*.



PRUEBA RÁPIDA DE UREASA

Helicobacter pylori

AMA RUT EXPERT

CARACTERÍSTICAS

- **99%** Preciso y sin espera de resultados de laboratorio
- Resultados precisos en **14 minutos**
- No necesita refrigeración
- Evalúa los resultados de hasta: **3 muestras de biopsias**
- Prueba práctica, compacta, fácil de usar
- Menos pasos, menos tiempo
- 48 pruebas disponibles

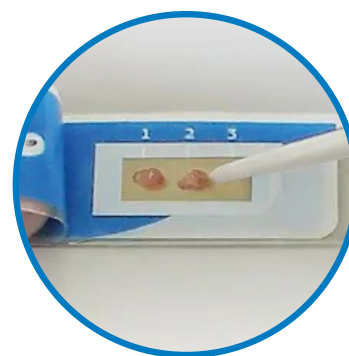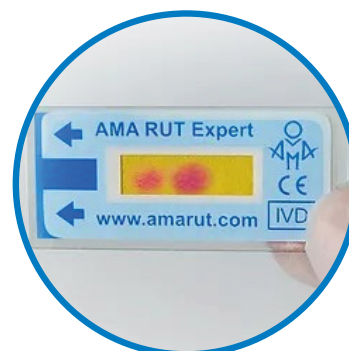

ALMACENAMIENTO, ESTABILIDAD Y CONDICIONES DE TRANSPORTE

Almacenamiento de prueba:

- En el embalaje del Fabricante.
- En un lugar oscuro y seco a temperatura de +4 °C a +42 °C.
- En un lugar protegido de impactos mecánicos (fricción, presión, golpes).
- Almacene el artículo fuera del alcance del vapor de amoníaco, la humedad y la luz solar directa.

Cuando se almacena a esta temperatura, el artículo permanece estable durante 24 meses. La fecha de vencimiento se indica en la etiqueta del paquete de prueba. El transporte es posible por cualquier método al sellar la prueba y a temperatura de -50 °C a +60 °C. El período de transporte no debe durar más de 1 mes.



Son compactas y fáciles de guardar.

El embalaje en forma de sobre hace que sea cómodo de transportar.

CATÁLOGO DE PRODUCTO

LABORATOIRE

endolis

Sistema de Balón Intragástrico



SISTEMA DE BALÓN INTRAGÁSTRICO

end-ball

LABORATOIRE
endalis

SISTEMA DE BALÓN INTRAGÁSTRICO

PARA EL TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
Y TEMPORAL DE LA OBESIDAD.

El balón gástrico Endalis es un dispositivo médico innovador para la pérdida de peso sin cirugía, diseñada y fabricada en Francia. Este dispositivo innovador reduce gradualmente el volumen del estómago, controla naturalmente las señales de hambre y logra una pérdida de peso significativa y duradera bajo supervisión médica profesional.



end-ball



El sistema End-ball ofrece una alternativa quirúrgica segura, lo que le permite obtener excelentes resultados sin los riesgos y el tiempo de recuperación de la cirugía. Cada plan de tratamiento se personaliza a su condición de salud única y a sus objetivos de pérdida de peso.

CARACTERÍSTICAS

- No estéril, de uso único, 18 meses de fecha de vencimiento.
- Biocompatible, ausencia de látex et ftalatos.
- Válvula radio opaca, compatibilidad con un examen IRM.
- Posibilidad de conectar el dispositivo sobre el endoscopio.
- Acondicionado en un sachet despegable y un estuche a almacenar en condiciones normales de conservación.
- Viene con todos sus accesorio.

SISTEMA DE BALÓN INTRAGÁSTRICO

end-ball

LABORATOIRE
endolis



Duración de la colocación

15 minutos

(bajo anestesia general con o sin intubación)

Duración de la extracción

15 minutos

(bajo anestesia general con intubación)

Duración del Tratamiento

6 meses

Características técnicas

BALÓN	
Bolsa	
Características	
Material	Poliuretano
Espesor	0.2 mm
Diámetro	110 mm
Válvula	
Material	Silicona, acero inoxidable y poliuretano
Dimensiones	L : 20 mm - Ø : 7 mm
SISTEMA DE INTRODUCCIÓN	
Material	Silicona, acero inoxidable PEHD y PVC
Largo útil	1000 mm
Dimensiones de la parte distal	L : 126 mm - Ø : 15 mm

Protocolo de llenado del balón

Referencia ENDT110  0459


200mL de aire + 500 mL de líquido = 700 ml



CATÁLOGO DE PRODUCTO



Stents Metálicos Autoexpandibles

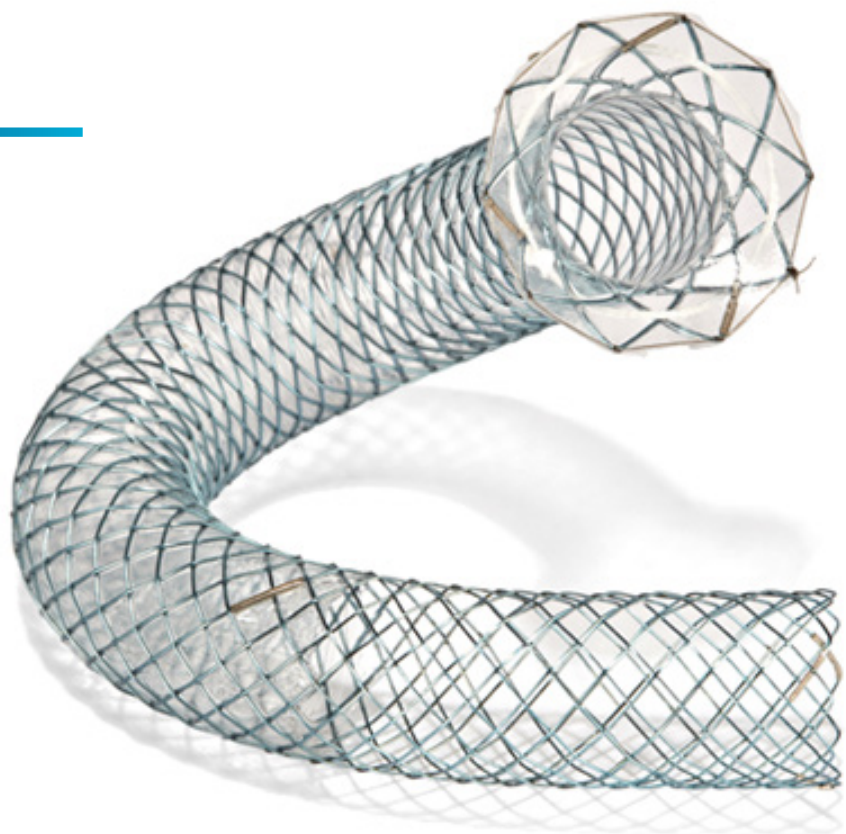


STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Biliar



S

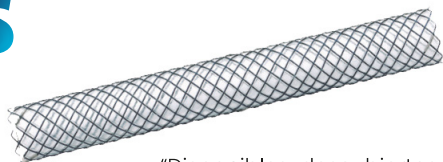


"Disponibles descubiertos y parcialmente cubiertos"

Para estenosis biliares benignas y malignas

- **Celda fija con construcción trenzada.**
- **Cubierto de silicona en la superficie interna y externa.**
 - Prevenir el riesgo de crecimiento del tumor.
 - Favorece el flujo biliar suave.
- **El hilo de recuperación facilita la extracción del stent.**


S Flare

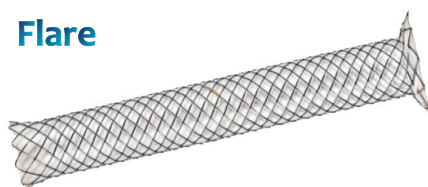

Para estenosis biliares benignas y malignas

- **Cuerpo tubular completamente cubierto con ensanchamientos en ambos extremos.**
 - La cubierta de silicona previene el crecimiento de tejido.
 - Los ensanchamientos con diferentes ángulos previene la migración.
- **Un hilo de recuperación facilita una extracción segura y suave.**


D

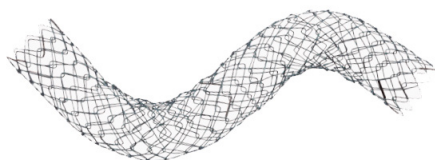

Para estenosis biliares malignas

- **Celda no fija con construcción de tejido.**
 - Retracción baja para un posicionamiento preciso.
 - Combinación óptima de fuerza radial y axial para mantener la permeabilidad urinaria en la anatomía tortuosa.


M

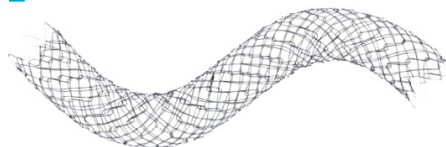

Para estenosis biliares malignas

- **Procedimiento de colocación de stents lisos lado a lado.**
 - Se pueden introducir simultáneamente dos sistemas de suministro de 6Fr en el canal de trabajo para el procedimiento de colocación de stents lado a lado en la estenosis biliar.

LCD

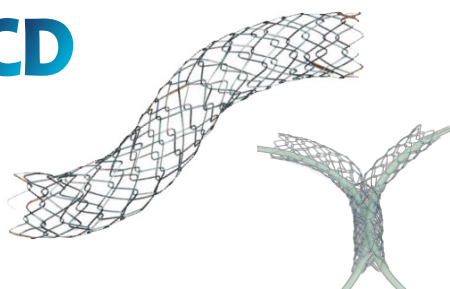

Para obstrucción hiliares


- **El diseño optimizado para el procedimiento Stent-in-Stent.**
 - El diseño de celdas grandes con una construcción entrelazada permite una colocación cómoda del segundo stent.
 - El eje vertical ajustable se puede mover fácilmente a un lado durante el procedimiento stent-in-stent para la segunda colocación del stent.
 - El sistema de colocación de 6 Fr facilita el acceso a la lesión a la vez que permite una colocación más suave.

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Biliar




COMVI

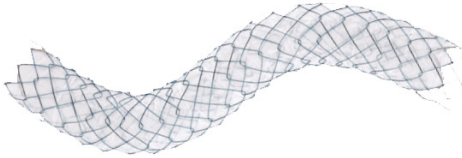


Para estenosis biliares malignas

- **Construcción de triple capa.**

- La membrana de PTFE previene el riesgo de invasión tisular. La malla de alambre exterior previene el riesgo de migración.
- La estructura celular no fija permite que el stent se adapte a la forma del conducto biliar.

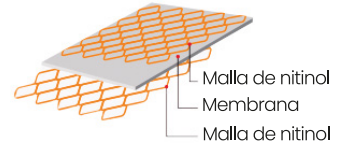

BUMPY

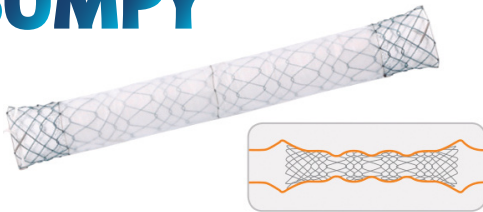

Para estenosis biliares y pancreáticas benignas

- **Tamaños de celda irregulares con diferentes magnitudes de la fuerza radial segmentaria con extremos ensanchados.**

- Prevención de sepsis pancreática o pancreatitis relacionadas con el stent.
- Reduce el riesgo de migración.

BUMPY String




Para estenosis anastomóticas después del trasplante de hígado

- **Stent BUMPY con un hilo de recuperación largo.**

- La corta longitud del stent reduce complicaciones relacionadas al largo del stent.
- Un hilo de recuperación radiopaco de platino de 10cm de largo facilita la extracción.

KAFFES

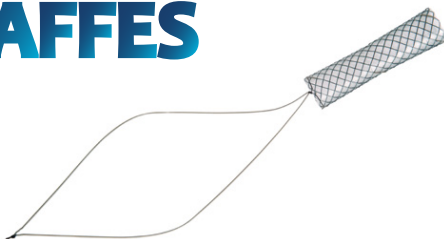

Para estenosis anastomóticas después del trasplante de hígado


- **Diseño de longitud corta y cintura en la porción media.**

- Prevención para ejercer presión sobre un área grande del conducto normal al reducir el riesgo potencial de necrosis y fibrosis.
- fuerte fuerza radial para prevenir la migración.

- **Cuerda de recuperación larga de platino radiopaca.**

- Facilita la extracción desde la ubicación alta del conducto biliar común.

GIOBOR

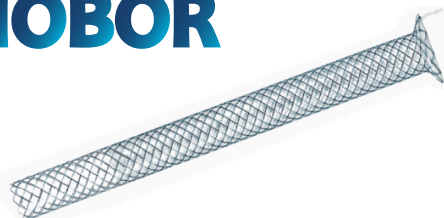

Para hepaticogastrostomía guiada por UE

- **Diseño parcialmente cubierto (70 % cubierto, 30 % descubierto).**


- La porción cubierta evita la fuga de bilis entre el conducto biliar común izquierdo y el estómago.
- La porción descubierta evita el bloqueo de las ramas laterales en el conducto hepático.

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Biliar



NAGI

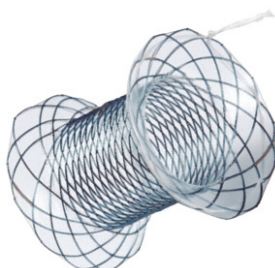


Para el drenaje de pseudoquiste pancreático

- **Bordes de ensanchamiento anchos y lisos.**
 - Para prevenir el riesgo de migración y la posibilidad de daños lumbales relacionados con el stent.
- **Disponible en varios diámetros (hasta 16 mm).**
 - Optimizar el drenaje y la necrosectomía.
- **Hilo de recuperación para reposicionamiento y/o fácil extracción.**

SPAXUS & HOT SPAXUS

Para pseudoquiste pancreático o drenaje de vesícula biliar

- **Diseño flexible para una aposición acomodativa independientemente del grosor de la pared.**
 - El recubrimiento completo de silicona con brida grande previene la migración y fugas.
 - Los diámetros de 8, 10 y 16 mm permiten su uso en diversas indicaciones.
- **Protesis precargada en sistema de 10 Fr, puede usarse de forma convencional o con electrocauterio**
 - Marcador azul en el sistema de administración diseñado para un procedimiento preciso.

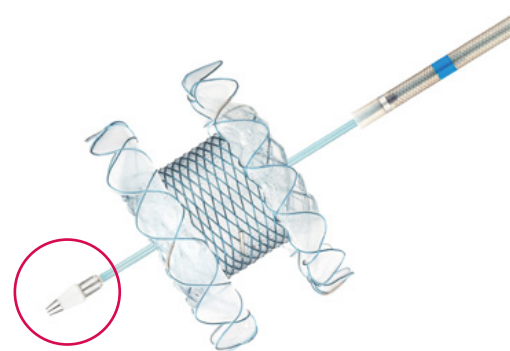

Punta de electrocautería

Sistema de Colocación de Alambre Corto para Stents Biliares

Información de Pedido

	Tipo de stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega	
		Endoscópico	Percutáneo	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	French (Fr)	Longitud (cm)
A través del alcance (TTS)	S (Uncovered)	B***	T***	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	7	180/50
	S (Covered)	BS***F	TS***F			8.5	
	S (Both bare)	BS***B	TS***B			8	
	S Flare	BS***FW	TS***FW			8.5	
	D	BD***	TD***			8	
	M	BN***-6	TN***-6	6, 8	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	6	
		BN***	TN***	6, 8, 10		7	
	LCD™	BLD***-6	TLD***-6	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	6	
		BLD***-7	TLD***-7			7	
		BLD***	TLD***			8	
	COMVI™	BC***F	TC***F	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	8	
	COMVI™ (Both bare)	BC***B	TC***B			8	
	BUMPY™	BK***CW	TK***CW			8.5	
	BUMPY™ String	BK***CW2		6, 8, 10	4, 6, 8	8.5	180
	KAFFES™	BS***F2	TS***F2	6, 8	4, 5, 6, 7, 8	8.5	180/50
				10		9	
	GIOBOR™	BS***FP		8, 10	8, 10	8.5	180
	NAGI™	BS***FW		10, 12	1, 2, 3	9	
				14, 16	2, 3	10	
	SPAXUS™	SS***FW		8, 10, 16	2	10	
	HOT SPAXUS™	HSS***FW		8, 10, 16	2	10	


LCD: BLD1012-6, TLD1012-6 no están disponibles.

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES


Stent Biliar



Sistema de alambre corto

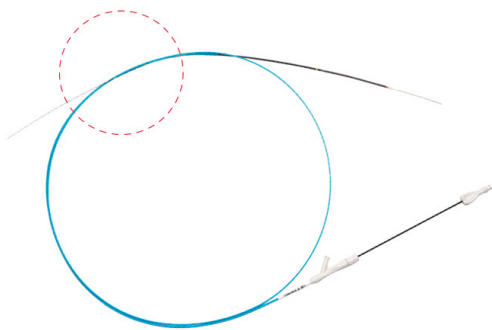

- Ahorro de tiempo durante los intercambios de dispositivos y las maniobras terapéuticas
- Reduce el tiempo de exposición a la fluoroscopia
- Menor dependencia de un asistente bien capacitado
- Fácil control de la guía
- Disponible con: S, D, LCD, COMVI BUMPY

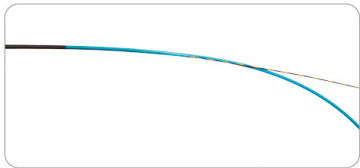

Información de Pedido


Tipo de stent	Código	Tamaño del Stent		Sistema de entrega	
		Diámetro (mm)	Longitud (cm)	French (Fr)	Longitud (cm)
S (Uncovered)	BM**##	6, 8, 10	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	8.5	180
S (Covered)	BSM**##F				
S (Both bare)	BSM**##B				
S Flare	BSM**##FW				
D	BDM**##				
LCD™	BLDM**##				
COMVI™	BCM**##F				
COMVI™ (Both bare)	BCM**##B				
BUMPY™	BKM**##CW				

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Esofágico



S

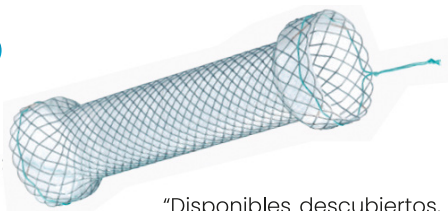


"Disponibles descubiertos, cubiertos y parcialmente cubiertos"

Para estenosis esofágicas benignas y malignas

- **Celda fija con construcción trenzada.**
 - Alta flexibilidad y óptima fuerza radial.
 - Reduce el riesgo de crecimiento tumoral.
- **Recubierto de silicona además de extremos suaves y redondos.**
 - Para reducir la reacción de hiperplasia tisular.


DUAL

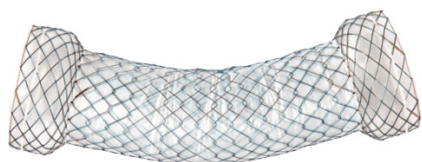

Para estenosis esofágicas benignas y malignas

- **Estructura dual con construcción entrelazada.**
 - La construcción entrelazada permite que el stent se adapte al movimiento del esófago.
 - La estructura dual minimiza el acortamiento y permite una colocación precisa del stent.


DOUBLE

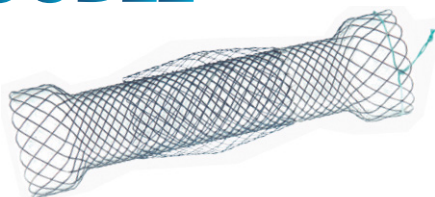

Para estenosis esofágicas malignas

- **Diseño de doble capa.**
 - La cobertura total de silicona previene el riesgo de crecimiento del tumor.
 - La malla exterior adicional descubierta ayuda a prevenir la migración.


DOUBLE (Antirreflujo)

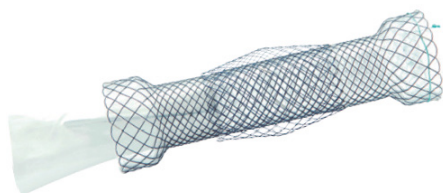

Para prevenir el reflujo gastroesofágico

- **Faldón de PTFE antirreflujo.**
 - Bloquea el reflujo gástrico con la colocación del stent en la unión gastroesofágica.
- **Malla exterior adicional descubierta para prevenir la migración.**

CERVICAL

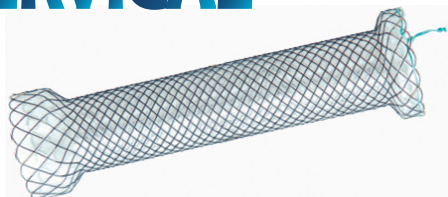

Para estenosis esofágicas superiores


- **Diseño de cabeza proximal corta.**
 - Para prevenir daños en las cuerdas vocales en caso de colocación cerca del esfínter esofágico superior.
- **Diseño totalmente cubierto y cuerda de recuperación para facilitar la extracción.**

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Esofágico



CONIO

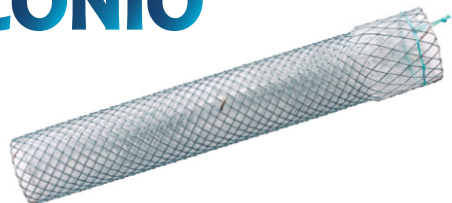

Para estenosis hipofaríngeas

- **Diámetro pequeño con diseño de cabeza proximal.**
 - Especialmente diseñado para estenosis hipofaríngeas refractarias.
- **Diseño completamente cubierto y cuerda de recuperación para facilitar su extracción.**

CONIO II



Para estenosis esofágicas superiores y medias benignas y malignas

Cabeza: Una estructura tipo S cubierta de silicona para una mejor paliación.

Cuerpo: Un tipo D adaptable con una membrana de PTFE para prevenir complicaciones relacionadas con el stent.

Protectores: Un anillo doble recubierto de silicona para evitar la migración.

MEGA



Para fugas o fístulas después de una gastrectomía en manga gástrica

- **Diseño suave y flexible.**
 - Para adaptarse a la anatomía después de una gastrectomía.
- **Totalmente cubierto de silicona.**
 - Para permitir una fácil extracción.
- **Diámetro grande y longitud larga del stent.**
 - Para evitar la migración.

BETA



Para fugas o fístulas después de una cirugía bariátrica

- **Diseño exterior de doble capa con cubierta combinada de silicona y PTFE.**
 - Evita el riesgo de migración y contacto de cualquier sustancia en la fuga o fístula.
 - Evita el crecimiento de tejido y permitir una fácil extracción.
- **Estructura flexible y adaptable.**
 - Se adapta a anatomías tortuosas.

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Esofágico



Información de Pedido

Tipo de stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega
	Cadena proximal	Ambas cadenas	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Longitud (cm)
S	ES**##F	ES**##FR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	70
S (Both bare)	ES**##B				
DUAL™	EK**##F		18,20	6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20	
			22	6, 8, 10, 12, 14, 15, 18	
			24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	
DOUBLE™	ES**##FD	ES**##FDR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	
DOUBLE™ (Anti-reflux)	EA**##FD				
CONIO™	ES**##FN	ES**##FNR2	10, 12, 14, 16	6, 8, 10, 12, 14, 15	
CONIO™ II	EK**##FN		10, 12, 14, 16	8, 10, 12	
CERVICAL™	ES**##FV	ES**##FVR2	16, 18, 20, 22, 24	6, 8, 10, 12, 14, 15	
MEGA™	ES**##F	ES**##FR2	22, 24, 28	18, 23	
BETA™	EK**##FND2		22, 24	14, 15, 16, 18, 20, 22	
			26, 28	14, 15, 16, 18, 20	
BETA™ II	EK**##FNT2		18, 20, 22	8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	
			24, 26, 28	10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	

Diversos Sistemas de Administración de Stents Esofágicos

Sistema de Liberación Proximal



- Colocación precisa del stent.
- La parte proximal se libera antes que la distal para permitir la colocación teniendo en cuenta el margen proximal del tumor sin fluoroscopia.
- Recomendado para estenosis esofágica superior.



Información de Pedido


Tipo de stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega
	Cadena proximal	Ambas cadenas	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Longitud (cm)
S	ESP**##F	ESP**##FR2	16, 18, 20, 22, 24, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	70
S (Both bare)	ESP**##B				
DOUBLE™	ESP**##FD	ESP**##FDR2			
CERVICAL™	ESP**##FV	ESP**##FVR2	16, 18, 20, 22		
CONIO™	ESP**##FN		10, 12, 14, 16		

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Esofágico



Sistema de colocación a través del endoscopio (TTS)

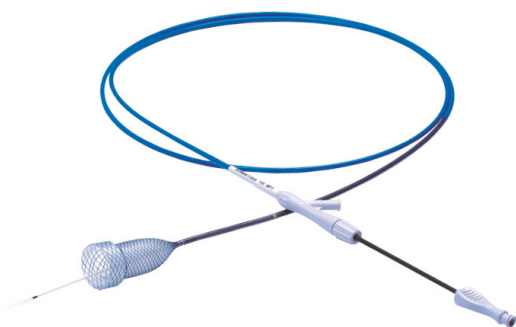

- Colocación de stents fácil y sencilla a través del canal del endoscopio.
- Precargado en un sistema de colocación de 10.5 Fr para stents esofágicos cubiertos.
- La solución práctica para anatomías tortuosas o estrechas.

Información de Pedido


Tipo de stent	Código		Tamaño del Stent		Sistema de entrega	
	Cadena proximal	Ambas cadenas	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	French (Fr)	Longitud (cm)
S	EST***F	EST***FR2	18, 20, 22	6, 8, 10 12, 14, 15	10.5	160
	EST***F-18					180
	EST***F-22					220
S (Both bare)	EST***B					160
	EST***B-18					180
	EST***B-22					220

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Duodenal y Colónico



D

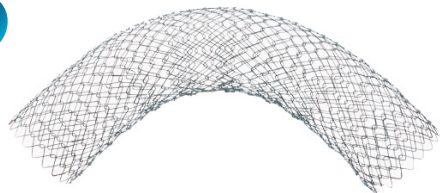


Para obstrucción maligna

- **Celda no fija con construcción entrelazada.**

- Retracción baja para un posicionamiento preciso.
- Combinación óptima de fuerza radial y axial para mantener la permeabilidad luminal en anatomía tortuosa.

S

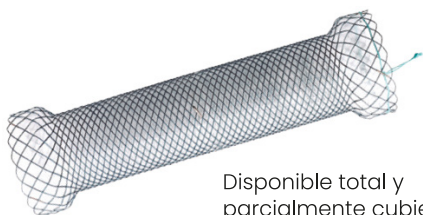

Disponible total y parcialmente cubierto

Para obstrucción benigna y maligna

- **Diseño recubierto de silicona con un cuerpo grande.**

- Para prevenir el riesgo de crecimiento del tumor.
- **La cuerda de recuperación facilita una extracción segura y suave.**


COMVI




Para obstrucción maligna

- **Construcción de triple capa.**

- La membrana de PTFE previene el riesgo de invasión tisular.
- La malla de alambre exterior previene el riesgo de migración.
- La estructura de alambre no fija permite que el stent se ajuste en anatomías tortuosas.

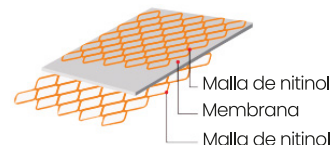


COMVI Flare

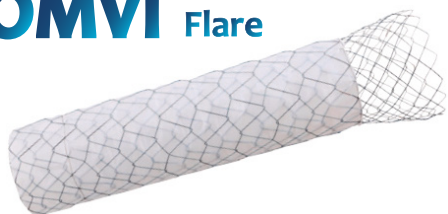

Para obstrucción maligna

- **Construcción de triple capa.**

- Ensanchamiento proximal descubierto y para reducir la migración.
- Cuerpo con estructura de celdas grandes con alambre grueso para reducir el riesgo de fractura y mejorar la fuerza radial.
- **Diámetro grande (hasta 26 mm) precargado en un sistema de liberación 10.5 Fr.**

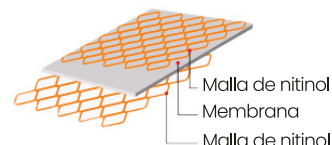

STENTS MÉTÁLICOS AUTOEXPANDIBLES

Stent Duodenal y Colónico



Información de Pedido

Tipo de stent	OTW			TTS			Longitud de colocación (cm)	
	Código	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Código	Diámetro (mm)	Longitud (cm)	OTW	TTS
S (Covered)	PS***#F	18, 20, 22, 24, 26, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	PST***#F	18, 20, 22	6, 8, 10, 12, 14, 15	135	180
S (Both bare)	PS***#B			PST***#B				
S (Proximal bare)	PS***#H			PST***#H				
D	PD***#		PDT***#	18, 20, 22, 24				
COMVI™	PC***#BA		6, 8, 10, 12	PCT***#BA	18, 20, 22	6, 8, 10, 12		
COMVI™ (Flare)				PCT***#P	18, 20, 22, 24, 26	6, 8, 10, 12		180
S (Covered)	CS***#F	18, 20, 22, 24, 26, 28	6, 8, 10, 12, 14, 15	CST***#F	18, 20, 22	6, 8, 10, 12, 14, 15	70	220
S (Both bare)	CS***#B			CST***#B				
S (Distal bare)	CS***#H			CST***#H				
D	CD***#	18,20,22,24,26,28,30	CDT***#	18,20,22,24,26,28				
COMVI™	CC***#BA	18,20,22,24,26,28	6, 8, 10, 12	CCT***#BA	18, 20, 22	6, 8, 10, 12		
COMVI™ (Flare)				CCT***#P	18, 20, 22, 24, 26	6, 8, 10, 12		220

CATÁLOGO DE PRODUCTO

OLYMPUS

Renta de Equipos
Endoscópicos Especializados



EQUIPOS ENDOSCÓPICOS ESPECIALIZADOS

OLYMPUS

OLYMPUS

RENTAS

EQUIPOS ENDOSCÓPICOS ESPECIALIZADOS
PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, **CON
RENTA POR PROCEDIMIENTO Y TÉCNICO
DE APOYO INCLUIDO.**



GF-UCT140-AL5

Endoscopio de
ultrasonido Lineal



GF-UE-160-AL5

Endoscopio de
ultrasonido radial



BF-3C160

Videobroncoscopio
pediátrico



PCF-160AL

Videocolonoscopio
pediátrico



GIF-XP160

Videogastroscoپیو pediátrico




BF-P160

Videobroncoscopio



TJF-160VF

Videoduodenoscopia

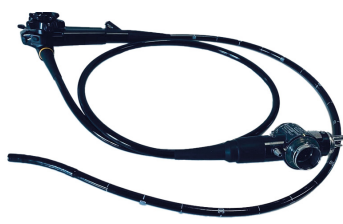

SIF-Q180

Videointeroscopia
(No incluye sobre tubo)



GIF-H180

Videogastroscoپیو

HOLT
MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

SITZMARKS

RADIOPAQUE MARKERS

Marcadores Radiopacos



holtmedical.com.mx

MARCADORES RADIOPACOS

para valoración de tránsito colónico

SITZMARKS
RADIOPAQUE MARKERS

SITZMARKS® es una opción rentable y no invasiva para investigar la motilidad del colon en pacientes con estreñimiento crónico y evaluaciones gastrointestinales negativas. Esta prueba de tiempo de tránsito colónico brinda información de diagnóstico para identificar posibles causas fisiológicas del estreñimiento crónico de un paciente al detectar afecciones como inercia colónica, hipomotilidad, obstrucción de la salida y otros trastornos de la cavidad intestinal, y determinar los próximos pasos para el paciente, ya sean pruebas adicionales o tratamiento personalizado.



Fácil para usted y sus pacientes

SITZMARKS consta de sólo 3 sencillos pasos. Primero, prescribe la prueba a su paciente. Luego, el paciente toma una cápsula el día 1. El día 5, el paciente se somete a una radiografía para revelar la trayectoria de los anillos radiopacos en el colon.

Composición

Cápsulas con anillos radiopacos.

Indicaciones

Diagnóstico en estudios de motilidad intestinal.

Presentación

1 caps. con 24 anillos radiopacos.



HOLT
MEDICAL

HOLT MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

OptimosTM

Accesorios Endoscópicos



holtmedical.com.mx


CISTOTOMO OPTIMOS

Para terapias guiadas por EUS

Optimos™

PRECISIÓN MEJORADA PARA ACCESO COMPLEJO

Diseñado para usarse como accesorio electroquirúrgico para canular la pared transgástrica o transduodenal y dentro de un pseudoquiste pancreático que sobresale visiblemente en el tracto gastrointestinal. Este dispositivo se suministra estéril y está diseñado para un solo uso.

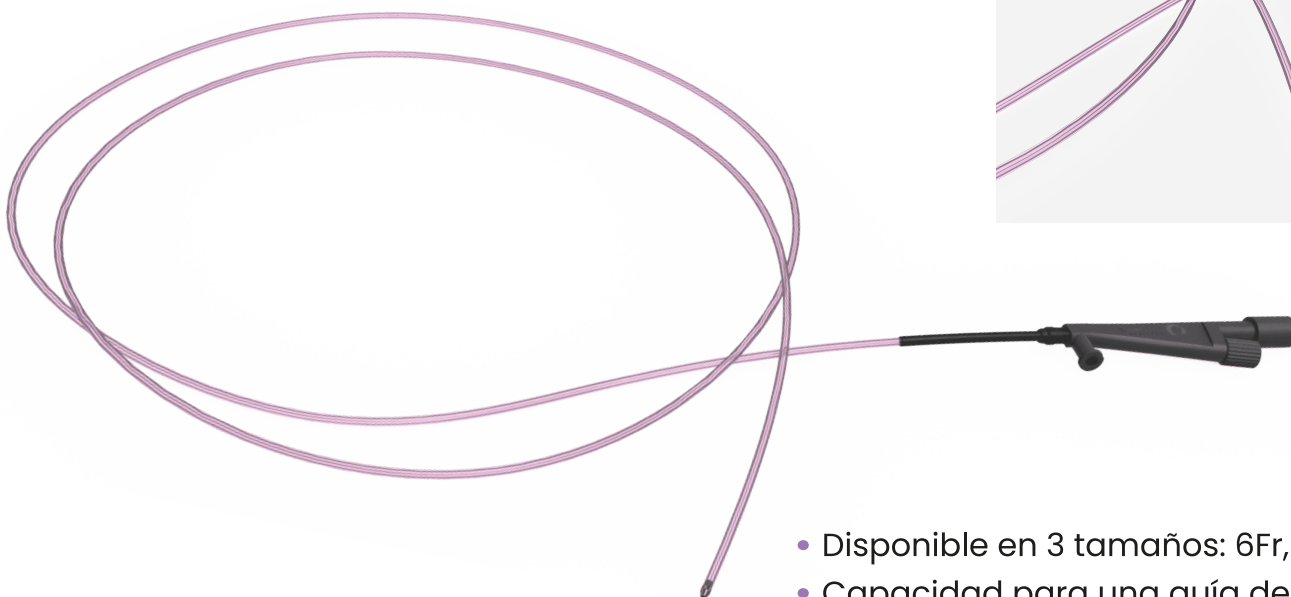


- Disponible en 3 tamaños: 6Fr, 7Fr y 8,5Fr.
- Capacidad para una guía de hasta 0,35".

Información para pedidos

No. de Producto	Camisa Diam. Ext.	Punta Diam. Ext.	Longitud útil	Cable guía recomendado
OCT1906	Ø 2.0mm	Ø 1.4mm	1,850mm	0.025~0.035"
OCT1907	Ø 2.3mm	Ø 1.4mm	1,850mm	0.025~0.035"
OCT1908	Ø 2.8mm	Ø 1.7mm	1,850mm	0.025~0.035"



El cable guía es ideal para proporcionar y ayudar en la inserción de dispositivos endoscópicos para endoscopia y ecografía.

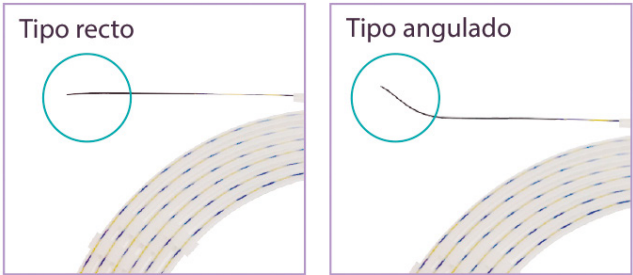

Application	Art. No.	Tipo	Cable	Punta distal	Total
			Diametro (mm)	Longitud (mm)	Longitud
0.035"	GW3- 455	Recto	0.813 (0.032")	55	4500
	GW3- 26A	Angulado		60	2600
	GW3- 45A				4500
0.025"	GW2- 265	Recto	0.533 (0.021)	55	2600

AGUJAS DE INYECCIÓN

Optimos

Optimos™



- El diseño del mango ergonómico brinda estabilidad y ayuda a tener un control preciso de la aguja
- El sistema de bloqueo evita que el mango se suelte
- El diámetro más ancho del catéter facilita la inyección de medicamentos
- Los mangos de diferentes colores ayudan a los usuarios a identificar el tamaño de aguja apropiado

Art. No.	Cable		Punta distal	
	Longitud (mm)	Calibre (G)	Longitud (mm)	Diametro (mm)
OIP1604-21G	4	21	1650	2.4
OIP2304-21G			2300	
OIP1604-23G	4	23	1650	
OIP2304-23G			2300	
OIP1604-25G	4	25	1650	
OIP2304-25G			2300	



Rotación de 360°

El controlador de bloqueo giratorio ha sido diseñado para proporcionar una rotación 360° del lazo de la trampa que permite un acceso preciso a los pólipos desde cualquier ángulo.


Art. No.	Tipo	Circunf.	Vaina exterior		Cable
		Diametro (mm)	Diametro (mm)	Longitud (mm)	Diametro (mm)
KSN16R-10	Ovalado	10	2.4	1650	0.45
KSN23R-10				2300	
KSN16R-15		15		1650	
KSN23R-15				2300	
KSN16R-20		20		1650	
KSN23R-20				2300	
KSN16R-25		25		1650	
KSN23R-25				2300	
KSN16R-30		30		1650	
KSN23R-30				2300	

HOLT MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

KLS martin
GROUP

Equipo y Accesorios
de Electrocirugía

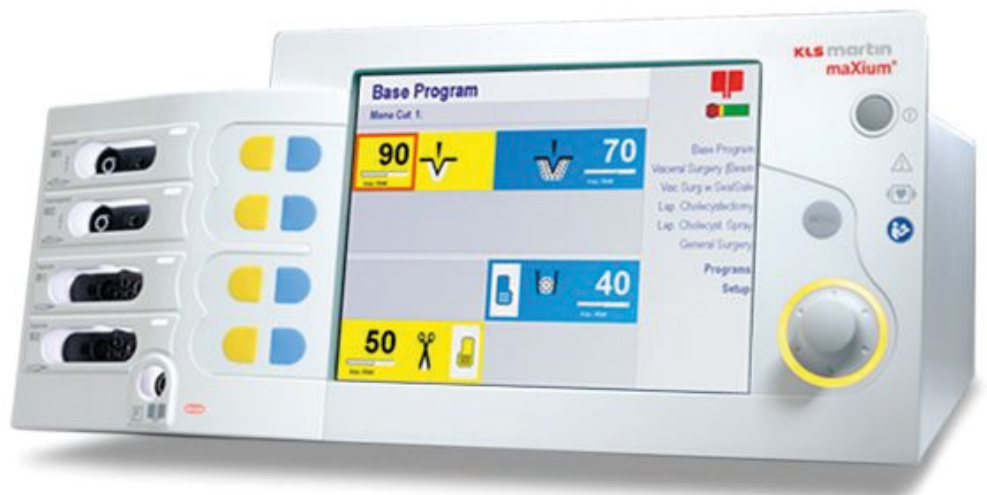

holtmedical.com.mx


EQUIPOS Y ACCESORIOS

Electrocirugía

KLS martin
GROUP

maXium® versión m con módulo de enchufe para accesorios KLS Martin

Maxium de KLS Martin: El aliado perfecto para procedimientos precisos, seguros y eficientes.

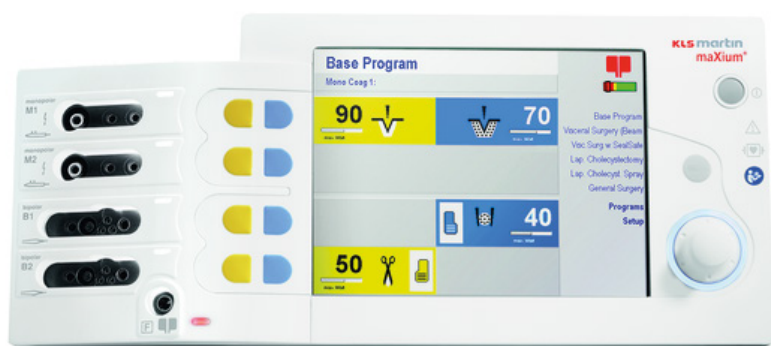

- Alta frecuencia multifuncional para precisión en cada procedimiento.
- Compatible con accesorios de cualquier fabricante, ¡sin límites!
- Personaliza tu experiencia. Hasta 99 configuraciones guardadas para adaptarse a ti.
- Innovación, versatilidad y confianza en un solo equipo.

Pinzas Bipolares

Pinzas bipolares con efecto antiadherente y ergonomía revolucionaria

- Disponibles en todos los tamaños habituales para los diferentes campos de aplicación.
- Las puntas de metal noble pulidas se caracterizan por su excelente conductividad térmica, evitando así la adhesión del tejido.
- El Mecanismo de guiado se asegura que las pinzas bajo tensión previa se cierran de forma paralela.
- Las pinzas bipolares nonStick red pueden utilizarse en todos los equipos de electrocirugía de uso comercial si se combinan con el cable de conexión adecuado.
- Geometría optimizada de las ramas para asegurar una mejor visibilidad,



HOLT MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Medi-Globe®

A MEDI-GLOBE COMPANY

Accesorios de Endoscopia



holtmedical.com.mx

ACCESORIOS DE ENDOSCOPIA

Medi-Globe



Medi-Globe®
A MEDI-GLOBE COMPANY



Trampa de pólipos



Pinzas para biopsia de
un solo uso y reutilizables



Línea de instrumentos
reutilizables



Cepillos de citología



Globos de extracción
de piedra



Alambres guía de un
solo uso y esterilizable
en autoclave



Trampas para polipec-
tomía Uso individual



Agujas de inyección:
uso único



Esfinterotomos
Uso individual

HOLT MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Ultrasonido ultraportátil
de alta tecnología



holtmedical.com.mx

ULTRASONIDO DE ALTA TECNOLOGÍA

P50



P50



Cabezales Intercambiables

Ultrasonido ultraportátil de alta tecnología de peso liviano, conveniente para llevarlo en la mano.

Gran Conectividad



Android



iOS



windows



Inalámbrico



Alámbrico



Imagen	Tipo de transductor	Modelo	Freq. (MHz)	Banda Ancha (MHz)	RADIO /HUELLA	Aplicaciones
	Convexo & Cardiológico	C5-2Fs	3.5	2-5	R50	Emergencia, Cardiología, Abdomen, OB/GYN, Urología y Pulmón.
	Convexo	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, OB/GYN, Urología y Pulmón.
	Lineal	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, pequeñas partes, mama, MSK, Nervios y Anestesia.
	Small lineal	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nervios, Anestesia, Vascular, Pequeñas partes, mama, MSK.
	Microconvexo	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal abdominal, Pequeñas partes y Cardio neonatal.
	Transvaginal	E10-4kS	6.5	5-8.5	R10	Obstetricia / Ginecología, Urología, IVF, Pélvico.
	Lineal Rectal	L10-4Vs	6	5-10	L64	Especial Vet: Largo para reproducción animal.

ULTRASONIDO DE ALTA TECNOLOGÍA

P8



Cabezales
Intercambiables



8 horas de
uso continuo

Ligero
2 20g

Gran Conectividad



Inalámbrico



Alámbrico

Compatible con



Android



IOS



Windows

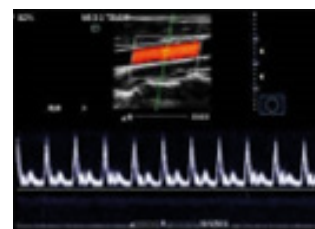


Imagen	Tipo de transductor	Modelo	Freq. (MHz)	Banda Ancha (MHz)	RADIO /HUELLA	Aplicaciones
	Convexo	C5-2Ks	3.5	2.5-5	R60	Abdomen, OB/GYN, Urología y Pulmón.
	Lineal	L11-4Ks	7.5	6-11	L40	Vascular, pequeñas partes, mama, MSK, Nervios y Anestesia.
	Small lineal	L11-4Gs	8.0	6-11	L25	Nervios, Anestesia, Vascular, Pequeñas partes, mama, MSK.
	Microconvexo	C8-5Ks	6.5	5-8	R15	Neonatal abdominal, Pequeñas partes y Cardio neonatal.

CATÁLOGO DE PRODUCTO

AOHUA

Sistema de Endoscopia
Ultra HD **AQ-300**



SISTEMA DE ENDOSCOPIA ULTRA HD

AQ-300

AQ-300

PROCESAMIENTO AVANZADO DE IMÁGENES **4K ULTRA HD**

El AQ-300, con mayor número de píxeles, modos de tinción óptica CBI ampliados, nueva plataforma interactiva y mejoras intuitivas, optimizará significativamente la calidad de imagen y la experiencia del usuario en endoscopia.



Optimización del color

- Basado en la saturación, el tono y el brillo.
- Procesa la imagen para reducir los errores de color.



Amplia gama de colores

- Ampliar la gama cromática
- Restaurar el color de forma realista



Monitores médicos de 55/32 pulgadas

- Pantalla fluida con respuesta rápida
- Mayor rango visual, antirreflejos, antidispersión



4K UHD

FHD

HD

SD

Soluciones Prácticas para Diversas Necesidades Clínicas

- Detección precisa de pequeñas lesiones
- Tratamiento quirúrgico endoscópico
- Prevención precoz del cáncer.

SISTEMA DE ENDOSCOPIA ULTRA HD


AQ-300

AOHUA

Ultra Alta Definición

Resolución
de 3840x2160P

Aumento óptico 4K
Aumento de hasta
100 veces.

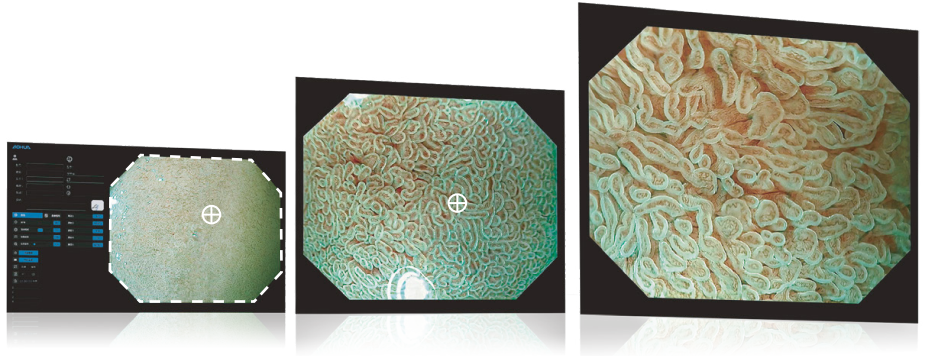

En consecuencia, los tejidos observados a través del endoscopio aparecen más realistas y tridimensionales, lo que ofrece a los médicos una experiencia visual más clara e inmersiva durante el diagnóstico y el tratamiento.





4 modos CBI en 5 LED

Mediante diferentes combinaciones de las cinco fuentes de luz LED, se pueden lograr cuatro modos de cromoendoscopia, lo que proporciona soluciones eficientes, rápidas y precisas para problemas clínicos en diferentes escenarios.

5 LED tecnología de procesamiento de fuentes de luz multispectral



4CBI Modos de cromoendoscopia óptica

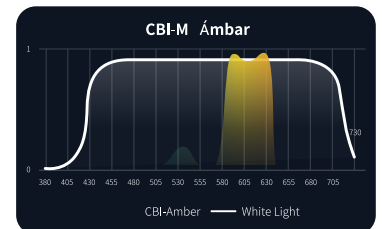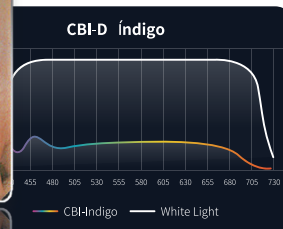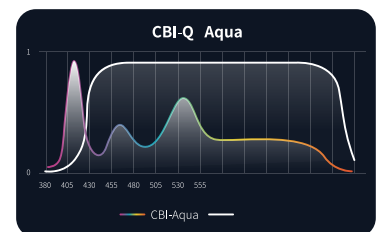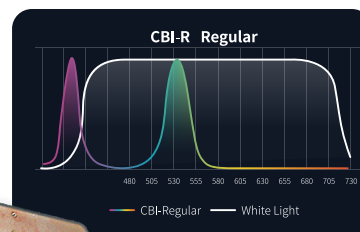

SISTEMA DE ENDOSCOPIA ULTRA HD

AQ-300

AOHUA

Plataforma de trabajo eficiente

Pantalla de doble imagen

- Admite dispositivos externos.
- Admite la visualización síncrona de imágenes CBI y de luz blanca.
- Modo de congelación de la observación.

Transmisión láser y fuente de alimentación inalámbrica

- Mayor velocidad de transferencia, presentando más detalles.
- Logra aislamiento eléctrico para evitar riesgos de fugas.
- Inmune a dispositivos eléctricos de alta frecuencia.



Tableta inteligente

- Arranque inteligente/Reconocimiento de endoscopio
- Reconocimiento facial/Control por voz

Colonoscopio de nueva generación

Asistencia Inteligente Colo



Transmisión de Fuerza de Sincronización

Transfiera la fuerza con precisión verticalmente y horizontalmente durante cada movimiento.



Rigidez Ajustable

Colonoscopio de rigidez regulable según la anatomía del paciente.

SISTEMA DE ENDOSCOPIA ULTRA HD

AQ-300


AOHUA



Flexión Elástica

Diseño de endoscopio flexible para mejorar la maniobrabilidad y ayuda a reducir el bucle.

Diagnóstico Eficaz

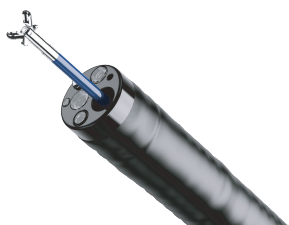


Canal de Instrumentos Grande de 4.2 mm

3.2 mm para gastroscopio / 4.2 mm para colonoscopio. Facilita la selección de consumibles y garantiza una potencia de succión suficiente.



Campo de Visión Amplio de 170°

Proporciona un campo de visión más amplio y amplía el rango de inspección. Reduce eficazmente el punto ciego y la tasa de diagnósticos erróneos.

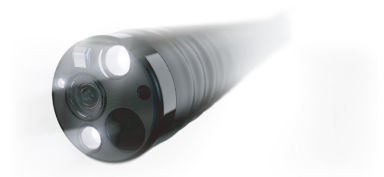

3 Guías de Luz

Proporciona un efecto de iluminación más amplio y uniforme para una calidad de imagen superior.



Chorro de Agua Hacia Adelante

Garantiza una visión clara en tiempo real y detectan rápidamente los puntos de sangrado.

SISTEMA DE ENDOSCOPIA ULTRA HD

AQ-300

AOHUA

Mango Mejorado



Mango de quinta generación

El diseño optimizado, ergonómico y ligero ofrece un agarre más cómodo. Fabricado con materiales ligeros y antideslizantes, aún más fácil y estable, garantiza una sujeción sin esfuerzo durante largos periodos de tiempo.

HOLT
MEDICAL

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Q³Medical
GROUP

Stents Biliares y pancreáticos
Biodegradable



holtmedical.com.mx

STENT BIODEGRADABLE ARCHIMEDES

Stent Biliar y Pancreático




ARCHIMEDES

Stent Biliar y Pancreático Biodegradable



El Stent Biliar y Pancreático Biodegradable ARCHIMEDES se usa para drenar obstrucciones en los conductos biliares o pancreáticos. El patentado diseño helicoidal con sistema de **doble drenaje** permite que la bilis fluya tanto hacia el exterior como desde el centro del stent a la vez que permite que el lumen permanezca abierto.

Desarrollado y diseñado para ser usado de forma endoscópica, percutánea o quirúrgica, en cirugía abierta, **laparoscópica o robótica**, ARCHIMEDES ofrece una solución flexible e innovadora ya que puede ayudar en **la reducción de complicaciones y costes asociados con estos procedimientos** para evitar que los pacientes vuelvan al hospital para la extracción del stent.

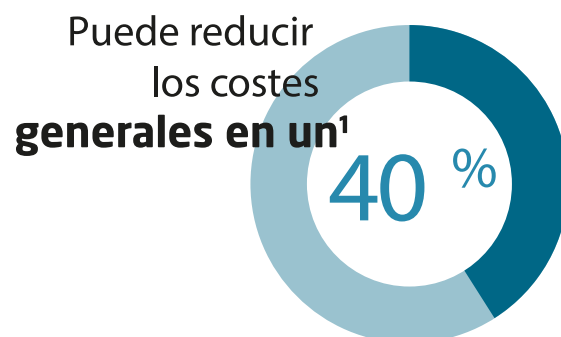


PERFILES DE DEGRADACIÓN

Recomendaciones en el uso de los perfiles de degradación del stent ARCHIMEDES para enfermedades subyacentes.

Perfiles de Degradación ²	Fuerza Mínima de Retención ³	Enfermedades subyacentes con obstrucción de conducto biliar	Enfermedades subyacentes de obstrucción de conducto pancreático
Degradación RÁPIDA	12 días	• Colelitiasis/ Coledocolitiasis • Pancreatitis Biliar Aguda • Colangitis • Los procedimientos en anatomías modificadas que incluyen las vías biliares y Pancreáticos, como el trasplante de hígado, la operación de Whipple (pancreatoduodenectomía) y similares	• Pancreatitis Post ERCP • Pancreatitis Aguda
Degradación MEDIA	20 días	• Colelitiasis/Coledocolitiasis • Fugas biliares • Fugas en conductos quísticos • Obstrucción CBD extirpable • Colangitis • Los procedimientos en anatomía modificada que incluyen las vías biliares y Pancreáticos, como el trasplante de hígado, la operación de Whipple (pancreatoduodenectomía) y similares	• Alteraciones de fuga en los conductos pancreáticos
Degradación LENTA	11 semanas	• Colelitiasis/ Coledocolitiasis • Estenosis biliares benignas • Estenosis malignas • Fugas biliares • Colangitis • Los procedimientos en anatomía modificada que incluyen las vías biliares y Pancreáticos, como el trasplante de hígado, la operación de Whipple (pancreatoduodenectomía) y similares	• Pancreatitis Crónica • Estenosis en el conducto pancreático

STENT BIODEGRADABLE ARCHIMEDES

Stent Biliar y Pancreático

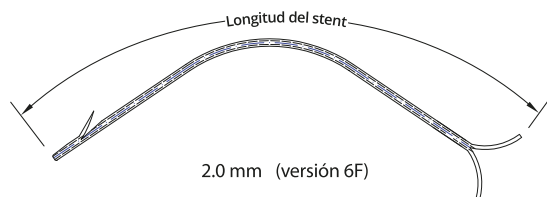


2.0 mm (versión 6F)

Disponibles para entrega inmediata

Stent Pancreático Biliar
Biodegradable
Archimedes BPS
Diámetro 2 mm (6F)
Longitud 40mm
degradación rápida

Stent Pancreático Biliar
Biodegradable
Archimedes BPS
Diámetro 2 mm (6F)
Longitud 40mm
degradación lenta

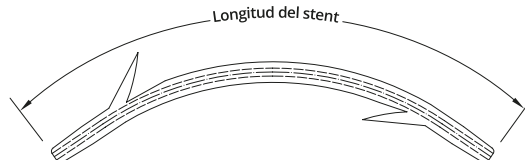

2.6 mm en versión (~8 F) y 3.4 mm en versión (~10 F)

Disponibles para entrega inmediata

Stent Pancreático Biliar
Biodegradable
Archimedes BPS
Diámetro 3.4 mm (10F)
Longitud 100 mm
degradación lenta

IMPLANTE CON STENTS BIODEGRADABLES

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE – Días de tratamiento



Implante del stent
Biodegradable

El paciente va a casa el mismo día y el stent biodegradable se degrada



Casa/ Sin Seguimiento
A no ser que el paciente tenga síntomas

BIODEGRADABLE
SOLUCIONES

STENT BIODEGRADABLE UNITY-B

Stent Biliar



UNITY-B

Sistema de Stent Biliar Biodegradable Balón Expandible para uso Endoscópico



El UNITY-B Sistema de Stent Biliar Biodegradable Balón Expandible para uso Endoscópico está diseñado para ayudar en el drenaje de conductos biliares obstruidos, con el beneficio extra de su degradación para potencialmente minimizar las complicaciones asociadas con los stents metálicos tradicionales.

Mejoras

Posee una amplia gama de tamaños y se coloca igual que cualquier otro stent balón expandible. La naturaleza biodegradable del stent UNITY-B tiene como objetivos mitigar el crecimiento de tejido dentro del stent evitar la perforación, casos comunes en los stents metálicos tradicionales.

Se evita la necesidad de extracción o recolocación del stent. Con el consiguiente ahorro de tiempo y posibles complicaciones. Está diseñado sobre un balón compliante, por lo que se adapta a la pared luminal sobredilatandose sin fracturarse.

Datos Técnicos del Stent

Características	8.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
Perfil de cruce (Max)	2.60 mm	2.61 mm	2.62 mm
Perfil de cruce (Mean)	2.52 mm	2.54 mm	2.56 mm
Acortamiento en NP (Max)	0.1%	1.3%	2.5%
Retroceso en NP (Max/ mean)	4.3% / 3.4%	3.1% / 1.7%	1.9% / 0%
Retroceso en RBP (Max/mean)	7.3% / 4.1%	6.8% / 3.45%	6.3% / 2.8%

Especificación de perfil de cruce para todos los diámetros: <2,67mm

STENT BIODEGRADABLE UNITY-B

Stent Biliar



Soporte Y Flexibilidad

EL stent biodegradable UNITY-B se diseñó basándose en la funcionalidad del Sistema Músculo Esquelético (Hueso y Músculo), el magnesio mimetizándose con el hueso y el polímero con el músculo. La parte Esquelética (Magnesio) del sistema es la principal estructura de soporte mientras que el Músculo (Polímero) ayuda con el movimiento y la estabilidad. De esta manera se han conseguido eliminar muchos de los problemas potenciales encontrados en la 1º generación de la tecnología biodegradable.



Especificaciones del Dispositivo

Descripción	Sistema de Stent Biliar Biodegradable Balón Expandible para uso Endoscópico
Característica del Globo	Semi-Compliant
Guía Recomendada	0.035" (0.89 mm)
Compatibilidad	8 F
Perfil de Entrada	min 0.95 mm $\pm$ 0.15 mm
Presión Nominal	9 bar
Presión de Nominal de Ruptura (RBP)	10 bar
Marcadores Radiopacos del Stent	2 marcadores a cada lado (distal y proximal)

Información para los Pedidos

Degradación	Balón Ø (mm)	Longitud de Globo (mm)	Longitud de Stent (mm)	Longitud útil del Catéter (cm)	Guía	Referencia
RAPIDA 1 - 3 Meses ¹	8	60	57	190	0.035"	19 MBXb 08057A
	9					19 MBXb 09057A
	10					19 MBXb 10057A
Degradación	Balón Ø (mm)	Longitud de Globo (mm)	Longitud de Stent (mm)	Longitud útil del Catéter (cm)	Guía	Referencia
MEDIA ² 3 - 6 Meses ¹	8	60	57	190	0.035"	TBD
	9					TBD
	10					TBD
Degradación	Balón Ø (mm)	Longitud de Globo (mm)	Longitud de Stent (mm)	Longitud útil del Catéter (cm)	Guía	Referencia
LENTA ² 6+ Meses ¹	8	60	57	190	0.035"	TBD
	9					TBD
	10					TBD

1. Los tiempos de degradación son estimados y están sujetos a cambios debido a la anatomía y bioquímica del paciente.
2. Los productos y tamaños en desarrollo, no disponibles por ahora, están sujetos a cambios.



CATÁLOGO DE PRODUCTO

contacto@grupoholt.com.mx



HOLT MEDICAL

holtmedical.com.mx



[@holtmedical-gastroendoscopia](https://www.facebook.com/holtmedical-gastroendoscopia)



[@holtmedical](https://www.instagram.com/holtmedical)